



## AUKŠTO LYGIO DEZINFEKCIJA

### Anioxyde 1000 LD

**AUKŠTO LYGIO DEZINFEKCINĖ MEDŽIAGA, SKIRTA  
TERMOJAUTRIEMS PRIETAISAMS IR ENDOSKOPIJOS  
ĮRANGAI**

- Tinkamumo laikas prieš naudojimą: 24 mėn
- Patentuota formulė
- PHERA® sistemos aukšto lygio dezinfekavimo priemonė, veikianti prieš bakterijų sporas
- Ekstemporinė peracto rūgšties gamyba
- Alternatyva glutaraldehidui
- Be aldehydų: nefiksuoja baltymų
- Galima kontroliuoti veiksmingumą vonelėje, naudojant testines juosteles
- Bendras efektyvumas per 5 minutes

TS 20.2.



# Anioxyde 1000 LD

Aukšto lygio dezinfekavimo priemonė, skirta termiškai jautriems instrumentams ir endoskopinei įrangai.

## PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

- Spalva vonelėje: rožinė po aktyvavimo
- Nėra acto rūgšties garų: geresnis vartotojo toleravimas
- Lengvas naudojimas: aktyvatorius integruotas į 5L skardinę
- Veiksmingumas įrodytas esant 1000 ppm peracto rūgšties
- Naudojimo trukmė mirkymo vonioje: ne ilgiau kaip 14 dienų (Prancūzijoje - 7 dienos) tirpalo atitiktį tikrinkite testinėmis juostelėmis
- Platus suderinamumas su medžiagomis, talpyklomis ir darbo stalu
- Galima naudoti esant garų siurbimo sistemai
- Dezinfekavimo tirpale yra nuo 2000 ppm peracto rūgšties (po aktyvinimo) iki 1000 ppm (ribinė koncentracija nustatoma testinėmis juostelėmis)

TS 20.2.

## TAIKYMO SRITIS

Aukšto lygio dezinfekavimo priemonė medicinos prietaisams: chirurginei ir medicininei įrangai, endoskopinei įrangai ir karščiui jautriai įrangai.

## SUDĖTIS

Peracto rūgšties gamyba iš acetilkaprolaktamo (PHERA sistema), Anioxyde 1000 LD sudėtyje yra 3 % vandenilio peroksido.




## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dviejų komponentų sprendimas profesionaliam naudojimui. Paruošta naudoti po aktyvinimo. 5 l kanistrui supilkite visą aktyvatorių (buteliuke yra 38,8 ml) į generatorių (5 l būgną) ir supilkite mirkymo vonioje susidariusį tirpalą. 1 l buteliukui: supilkite visą aktyvatorių (buteliuke, kuriame yra 8,3 ml) į generatorių (1 l būgną), tada supilkite tirpalą, pagamintą mirkymo vonioje.

Prieš pirmą kartą naudodami palaukite bent 30 minučių (laikas, reikalingas gaminiui suaktyvinti)

Prieš mirkydami medicinos prietaisą ANIOXYDE 1000 LD (aktyvuotame tirpale), jį kruopščiai nuvalykite ir nuplaukite. Patikrinkite peracto rūgšties kiekį naudodami ANIOXYDE 1000 LD testavimo juostelę seanso pradžioje, vėl pradėdami darbą po pertraukos ir kas 4 valandas iš eilės. Maksimalus mirkymo vonelės laikymas: 14 dienų (išskyrus Prancūziją - ne ilgiau kaip 7 dienas acc. Prancūzijos reglamentą)

TS 20.2.

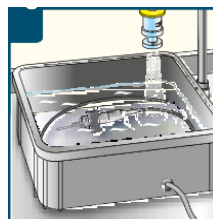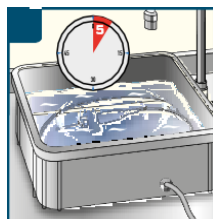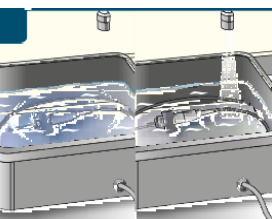

**Išankstinis dezinfekavimo etapas:** Medicinos prietaisą nuvalykite plovikliu arba priešdezinfekcine priemone. Kruopščiai nuplaukite. Endoskopinei įrangai: valykite kanalus šepetėliu.

**Dezinfekavimo etapas:** Supilkite aktyvuotą tirpalą (žr. aktyvavimo procedūrą etiketėje/protokole). Uždenkite talpyklą. Laikykite minimalaus kontakto laiko. Endoskopinei įrangai: pasirūpinkite, kad tirpalas cirkuliuotų kanaluose. Į "Anioxyde 1000 LD" nepriekite jokių produktų.

Kruopščiai nuplaukite steriliu arba filtruotu vandeniu (0,2 µm), kad neliktų jokių produkto pėdsakų. Endoskopinei įrangai: vidines ir išorines medicinos prietaiso dalis.

Nusausinkite vienkartinį rankšluosčiu. Laikykite medicinos prietaisą kuo aseptiškiau, kol vėl jį panaudosite.

1. Išankstinis dezinfekavimo etapas: Medicinos prietaisą nuvalykite plovikliu arba priešdezinfekcine priemone. Kruopščiai nuplaukite. Endoskopinei įrangai: valykite kanalus šepetėliu.
2. Dezinfekavimo etapas: Supilkite aktyvuotą tirpalą (žr. aktyvavimo procedūrą etiketėje/protokole). Uždenkite talpyklą. Laikykite minimalaus kontakto laiko. Endoskopinei įrangai: pasirūpinkite, kad tirpalas cirkuliuotų kanaluose. Į Anioxyde 1000 LD nedėkite jokių produktų.
3. Kruopščiai nuplaukite steriliu arba filtruotu vandeniu (0,2 µm), kad neliktų jokių produkto pėdsakų. Endoskopinei įrangai: vidines ir išorines medicinos prietaiso dalis.
4. Nusausinkite vienkartinį rankšluosčiu. Medicinos prietaisą laikykite kuo aseptiškiau, kol vėl galėsite jį naudoti.

## MIKROBIOLOGINĖS SAVYBĖS

| REIKALAVIMAS/SĄLYGOS                                                         | KONTAKT. LAIKAS |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Baktericidinis – pagal EN 13727 / EN 14561, švarios sąlygos                  | 5 min           |
| Mielicidinis – pagal EN 13624 / EN 14562, švarios sąlygos                    | 5 min           |
| Tuberkulocidas – pagal EN 14348 / EN 14563, švarios sąlygos                  | 5 min           |
| Fungicidinis – pagal EN 13624 / EN 14562, švarios sąlygos                    | 5 min           |
| Mikobaktericidinis – pagal EN 14348 / EN 14563, švarios sąlygos              | 5 min           |
| Virucidinis – pagal EN 14476 / EN 17111, švarios sąlygos                     | 5 min           |
| Adenovirusas – pagal EN 14476 / EN 17111, švarios sąlygos                    | 5 min           |
| Norovirusas – pagal EN 14476 / EN 17111, švarios sąlygos                     | 5 min           |
| Sporicidas prieš B. Subtilis / C. Difficile: pagal EN 17126, švarios sąlygos | 5 min           |

TS 20.2.

## PAKUOTĖS IR UŽSAKYMO INFORMACIJA

| PRODUKTAS        | PAKUOTĖ                                                              | UŽSAKYMO KODAS |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Anioxyde 1000 LD | 4 x 5 L kanistras + integruotas aktyvatorius                         | XXXXX          |
| Anioxyde 1000 LD | Peracto rūgšties 1000 ppm normos testinės juostelės (50 vnt. dėžutė) | XXXXX          |



## SANDĖLIAVIMAS

Pavojinga – laikykite naudojimo atsargumo priemonių (Parengta pagal galiojančias Europos taisykles dėl cheminių produktų klasifikavimo ir ženklinimo. Sandėliavimas: nuo +5°C iki +25°C.

## SERTIFIKATAS

Medicininis prietaisas. Visas Anioxyde 1000 LD antimikrobinis aktyvumas įtrauktas į mokslinę dokumentaciją, kurią galima gauti paprašius.

## MEDICINOS PRIETAISAS NAUDOKITE SAUGIAI

Perskaitykite etiketę ir informaciją apie gaminį.

