



Seal Test is used to control the sealing machine whether if it meets the sealing standards or not. Seal test; visibly show the sealing machine results and quality so that the sealing problems can be found quickly and can be used to ensure the sealing parameters, requirements and the quality.

- Water-based and non-toxic chemical indicator is used.
  - It is easy to read and interpret.
  - Compatible with ISO 11607.
- Paskirtis - popieriaus plastiko pakuočių užlydymo įrenginio kontrolės atlikimui Seal-Check testu / indikatoriumi. Atitinka ISO 11607-2.  
Pritaikytas dokumentuoti. Ant indikatoriaus testo yra vietos reikiamai informacijai įrašyti – kas testavo, data. Parodo aiškų rezultatą.

C-1001

Temperature  
Temperatur  
Température

Pressure  
Druck  
Pression

Speed  
Geschwindigkeit  
Vitesse

Sealer  
Siegelgerät  
Soudeuse

Counter  
Zählerstand  
Compteur

Date  
Datum  
Date

Approval  
Freigabe  
Autorisation

Signature  
Unterschrift  
Signature

°C

N

m/min

STERISTAR

REF C-1001  
LOT 2101980

2021-01  
2026-01

SEAL TEST

NECATI KAYA TIBBİ CİHAZ VE İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
İvedik O.S.B. Ağaç İşleri Sitesi, 1350. Sokak No:30 Yenimahalle  
06575 ANKARA / TÜRKİYE  
www.steristar.com  
T: +90 312 562 02 21 & 22 F: +90 312 562 02 19

| REF NO | DESCRIPTION                                | PACKAGING         |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| C-1001 | Seal Test for Rotary Sealers (Pack of 100) | 50 Packs / CARTON |

Washer Disinfector Efficiency and Ultrasonic Efficiency Control Test



Designed for monitoring washer and ultrasonic washer device efficiency. Stainless Steel Frame can be used for both of them as a holder.

- Ready to use (single-use product).
- The test provides efficient and reliable results.
- It is easy to read and interpret.
- Compatible with ISO 15883-5.

C-1065

STERISTAR

REF C-1065  
LOT 2101902

2021-01 | 2023-01

PRODUCT SIZE:  
47 X 100 mm

C-1063

C-1061

STERISTAR

REF C-1061  
LOT 2101900

2021-01 | 2023-01

PRODUCT SIZE:  
47 X 100 mm

| REF NO | DESCRIPTION                                              | PACKAGING         |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| C-1061 | Washer Disinfector Efficiency Control Test (Pack of 100) | 50 Packs / CARTON |
| C-1063 | Stainless Steel Frame for C-1061 & C-1065                | 20 Pcs. / CARTON  |
| C-1065 | Ultrasonic Efficiency Control Test (Pack of 100)         | 50 Packs / CARTON |

ANKARA  
05/04/2023

**DECLARATION OF CONFORMITY**

**REF:** C-1001

**DESCRIPTION:** Seal Test For Rotary Sealers

To whom it may concern,

We hereby, as manufacturer declare that STERISTAR brand Seal Test indicator comply with ISO 11607.

Best Regards,

Hande Nur VAPURCU

Quality Responsible

 **NECATİ KAYA**  
TIBBİ CİHAZLAR İTHALAT VE İHRACAT  
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
İvedik OSB 2. Etap 1. Blok 1. Kat  
No:30 Y. Y. Y. / ANKARA 05378  
Tel: 0312 295 30 22 Fax: 0312 295 30 19  
Mersis No: 0630 0407 8500 0012  
Tic. Sic. No: 295306 Ulus V.D. 030040 7850

[www.steristar.com](http://www.steristar.com)

GUZELHISAR MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI NO: 433 06750 AKYURT/ ANKARA/TURKIYE  
T:+90 312 562 02 21 & 22 F:+90 312 562 02 19 [info@steristar.com](mailto:info@steristar.com)

## UŽLYDymo SIŪLĖS KOKYBĖS KONTROLĖS TESTO NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA


1. Įdėkite indikatorių į pakavimo juostos fragmentą laminuota puse į viršų.
2. Paleiskite pakavimo juostos fragmentą su viduje esančiu indikatoriumi per užlydymo aparatą, kad siūlė eitų per indikatoriaus juodą vertinimo lauką.
3. Įvertinkite, ar siūlė yra tolygi be įtrūkimų.




- Jeigu linijos yra nutrūkstančios, apatinės linijos plotis svyruoja, reiškia pasirinkta užlydymo temperatūra yra per žema.



- Jeigu atsiranda raukšlių ir klosčių, reiškia užlydymo metu sutrukdė juostos transportavimas.

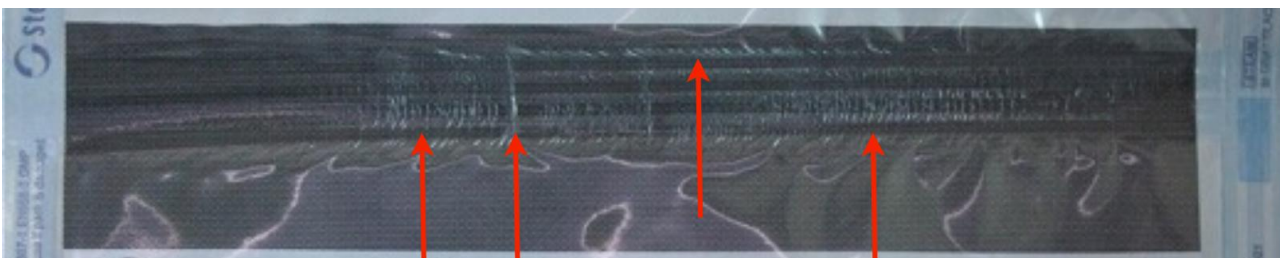

- Jeigu atsiradusios klostės sudaro tarpus, reiškia kad paketo turinys yra per didelis maišeliui.

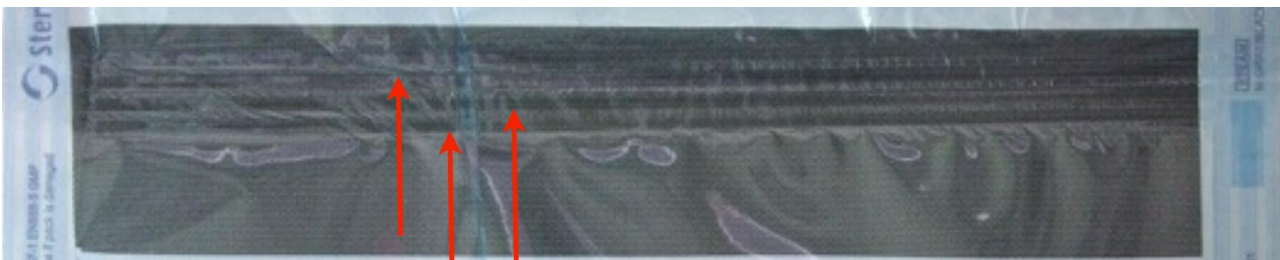

4. Po siūlės kokybės įvertinimo užpildykite indikatoriaus laukus:

- užlydymo temperatūra
- užlydymo slėgis
- užlydymo greitis
- užlydytuvo nr. (jeigu turimas ne vienas)
- operatoriaus ID
- testo atlikimo data
- įvertinimas, ar testas teigiamas
- vertintojo parašas



**Necati KAYA**  
TIBBİ CİHAZLAR İTHALAT VE İHRACAT  
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ANKARA  
05/04/2023

Produktas: C-1001

Aprašymas: testas užlydytuvo siūlei vertinti

### ATITIKTIES DEKLARACIJA

Mes, kaip STERISTAR prekinio ženklo linijos gamintojas, patvirtiname, kad Užlydymo indikatorius - Seal Test atitinka ISO 11607 standarto reikalavimus.

Pagarbiai,  
Hande Nur Vapurcu

/parašas/